

Cystofix®

NOVÁ GENERACE READY-TO-USE KATÉTRŮ

Katétry Cystofix® mají širokou škálu použití
– od akutních indikací až po dlouhodobou péči.


Katétry se vyrábějí z polyuretanu nebo silikonu, s balónkem nebo bez, s rovným koncem pro minimální invazivitu nebo s koncem zahnutým, umožňujícím účinnou drenáž moči díky četným postranním otvorům.

VÝHODY

- Velmi přesná punkce:
Ostrý hrot kanyly z nerezové oceli
- Snadné uchopení:
Úchop pomocí 3 křidélek
Rozlomitelná kanyla
- Hladký skluz (« Glide Effect »):
Vnitřní povrch kanyly je ošetřen silikonem
a umožňuje hladké zavedení katétru
- Nižší riziko poranění močové trubice a nekróz
- Lepší pocit pacienta – vyšší komfort v porovnání
s permanentním močovým katétre, zejména pro pacienty na invalidním vozíku
- Nižší riziko zkřížené kontaminace katétru
Zajistěte pacientům snadnou a bezpečnou drenáž moči díky zlatému standardu suprapubické perkutánní katetrizace

INDIKACE

- Stav, kdy není indikována intermitentní jednorázová katetrizace, akutní a chronická retence moči a akutní prostatitida
- Obstrukce, striktura, abnormální anatomie močové trubice, poranění pánve
- Incontinentia alvi – u inkontinentních pacientů dochází ke stálému znečišťování permanentního transuretrálního katétru stolicí

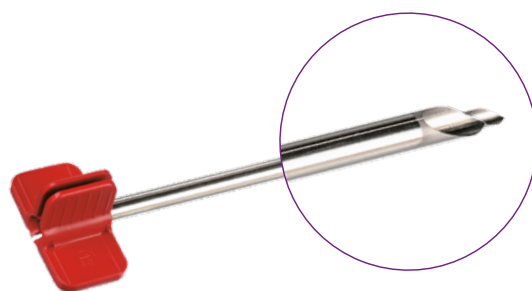

Cystofix®/Cystofix® Paed punkční sada, výměnná sada nebo výměnná dilatační sada jsou zdravotnické prostředky určené pro suprapubickou perkutánní katetrizaci. Složení: Drenážní katetr, předsestavený v drenážní kanyle, ochranná hadice (v případě punkční sady Cystofix®), zátky pro balónkový katetr (nevztahuje se na sadu Cystofix® Paed), drenážní sáčky (objem 2l) s drenážním ventilem a ochranným uzávěrem (pouze v případě punkční sady Cystofix® se sáčky). Indikace: Katetrizace močového měchýře po chirurgických výkonech, v případě dysfunkce močového měchýře, retence moči, k diagnostickým účelům, rozboru moči. Kontraindikace: rakovina močového měchýře, při antikoagulační a protidestičkové léčbě, v případě sepse abdominální stěny, přítomnosti subkutánního cévního bypassu v suprapubické oblasti. Vedlejší účinky: V případě, že i přes speciální provedení a materiál katétru dojde k usazování složek moči na povrchu materiálu katétru, zkontrolujte pH moči, koncentraci moči a zvažte možnou urinární infekci. Občas se může vyskytnout strangurie z důvodu podráždění cizím tělesem. Upozornění: zavedení suprapubického perkutánního katétru (SPC) a péče o pacienta s SPC musí být provedena pouze kvalifikovaným zdravotnickým personálem proškoleným k provádění těchto úkonů. Výrobky Cystofix® nejsou určeny k dlouhodobé implantaci. Výrobce těchto zdravotnických prostředků je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnických prostředků a další důležité informace.

KATÉTR UVNITŘ KANYLY



MOŽNÉ KOMBINACE SBĚRNÝCH SYSTÉMŮ



Ureofix® Compact



Ureofix®112 Plus



Urimed Bags



Uro-Tainer®

	Výrobek	Velikost katétru (CH)	Délka kanyly (cm)	Délka katetru (cm)	Katalog. číslo	Kusů v balení	Složení sady
AKUTNÍ A STŘEDNĚDOBÁ PÉČE	Cystofix® Set Ready-to-Use bez sběrného sáčku	10	8	65	445 0100	10	
		10	12	65	445 0120	10	
		15	12	65	445 0130	10	
	Cystofix® Set Ready-to-Use se sběrným sáčkem o objemu 2 l	10	8	65	445 0150	10	
		10	12	65	445 0160	10	
		15	12	65	445 0170	10	
Cystofix® Exchange Set	10	-	44	445 0010	5		
	14	-	44	445 0014	5		
DLUHODOBÁ PÉČE	Cystofix® Set Ready-to-Use s balónkovým katétrem, rovný konec	12	12	44	445 0200	10	
		14	12	44	445 0220	10	
	Cystofix® Set Ready-to-Use s balónkovým katétrem, konec J	12	12	53	445 0210	10	
	Cystofix® Exchange Set s balónkovým katétrem - rovný konec	12	-	44	445 0012	5	
	Cystofix® Dilatation-Exchange Set s balónkovým katétrem - rovný konec	12	-	44	445 0512	5	
	Cystofix® Dilatation-Exchange Set s balónkovým katétrem - rovný konec	16	-	44	445 0716	5	
	PEDIATRIE A NEONATOLOGIE	Cystofix® PAED Basic Set – dětský set se sběrným sáčkem 2 litry	10	5	50	4450180	10
Cystofix® PAED Exchange Set		10	-	44	4450010	5	
Cystofix® MINIPAED Basic Set		5	5	50	444 1036	10	