

# Nephrofix® Nephrofix® Certo

## NEFROSTOMIE, URETERÁLNÍ STENTY, CYSTOMETRIE

### Sety pro punkční perkutánní nefrostomii

#### KATETR VYROBENÝ Z CERTONU (POLYURETAN)

- RTG viditelný, flexibilní s vysokou tkáňovou tolerancí
- Nízké riziko vzniku inkrustací
- Barevná kalibrace – exaktní informace o hloubce zavedení
- Konec ve tvaru pig-tailu

#### PUNKČNÍ KANYLA


- Trojdílná kovová punkční kanyla s nastavitelnou hloubkou vpichu pro přímou punkci ledvinné pánvičky pod UZ kontrolou
- Atraumatická kovová kanyla s mandrénem a zkosenou facetou
- Snadná lokalizace pod UZ kontrolou

#### BALONKOVÝ KATETR

- Drenážní otvory na obou stranách balonku
- Ukotvení katetru přímo v ledvině
- Vyrobený ze silikonu s excelentní tkáňovou kompatibilitou (tolerancí)


#### Nephrofix®

Set s dvoudílným mobilním vodičem ke stabilizaci katetru

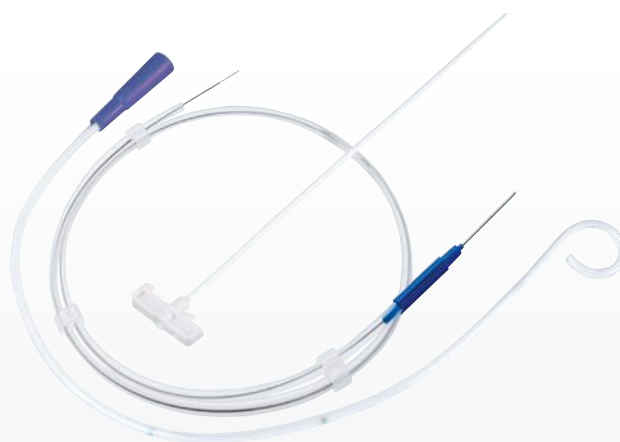

#### Nephrofix® Certo

Set s jednodílným rigidním 300 mm držákem a flexibilním J koncem – vodič Linderquistova typu

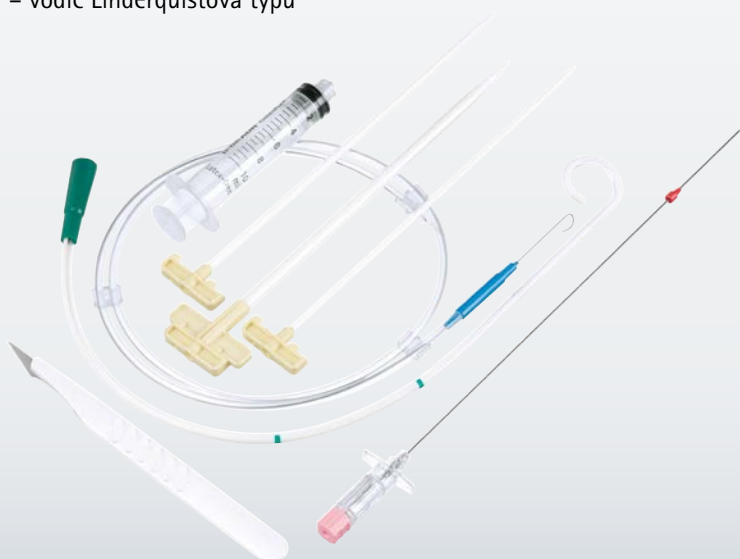

Název výrobku	Kusů v bal.	Katalog. č.	SUKL kód
Nephrofix® - set pro perkutánní nefrostomii CH 11	5	4435117	0029745
Nephrofix® - set pro perkutánní nefrostomii CH 14	1	4435141	0029745
Nephrofix® Certo - set pro perkutánní nefrostomii CH 8	5	4435583	0029745
Nephrofix® Certo - set pro perkutánní nefrostomii CH 11	5	4435613	0029745
Nephrofix® Certo - set pro perkutánní nefrostomii CH 14	5	4435648	0029745
Nephrofix® Certo - set pro nefrostomii s balónkovým katétre CH 12	5	4435745	-
Nephrofix® Certo - výměnný set CH 11	5	4436113	0029757
Nephrofix® Certo - výměnný set s balónkovým katétre CH 12	5	4436741	-

Nephrofix® a Nephrofix® Certo jsou sety pro perkutánní nefrostomii. Zdravotnické prostředky. Indikace: K výměně zavedeného nefrostomického katétru. Složení: Polyuretanový katétr, vodící drát, dilatátory z nichž poslední má nasazen rozlomitelný obal (pouzdro), u SD setu katétr s polohovací trubicí. Kontraindikace: Žádné. Rizika: Při zalomení či zaškrtní katétru v úrovni kůže, při jeho inkrustaci či ucpaní, dochází ke stagnaci odtoku moči a vzniká městnání v dutém systému ledviny. Při fixaci katétru, přišití/přilepení, je nutné se jeho zaškrtní či zalomení vyvarovat. Doporučená doba ponechání katétru: Nephrofix® a Nephrofix® Certo nejsou považovány za trvalý implantát. Při dlouhodobé léčbě by měly být katétrů vyměňovány každé tři měsíce. Funkce katétru musí být kontrolována v pravidelných intervalech. Metodu kontroly a délku intervalů stanoví lékař. Náprava funkčnosti musí být provedena odpovídajícími prostředky. Upozornění: Opětovné použití prostředků určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti prostředku, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Používejte jen originální nepoškozené balení. Nesterilizujte. Výrobce tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Prosím pečlivě si přečtěte návod k použití, protože tento obsahuje důležité informace o možných rizicích spojených s používáním zdravotnických prostředků.